


Helix*

Ｏリングフリーネブライザーアダプター

新製品!

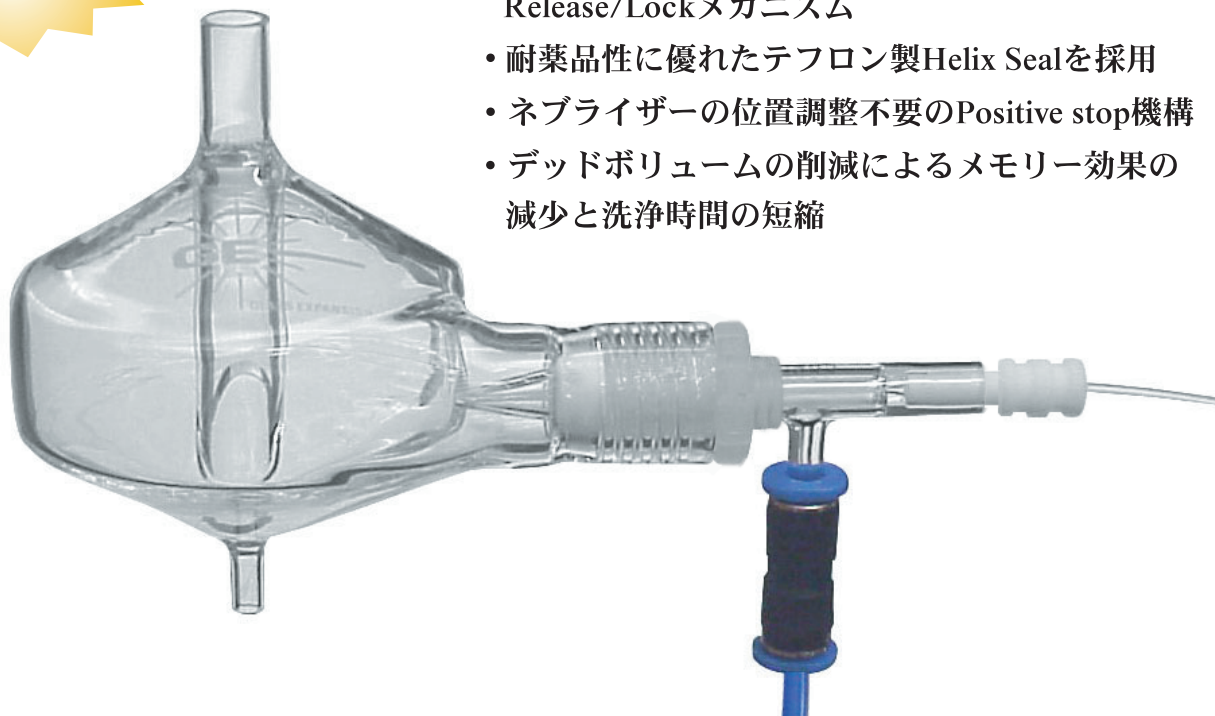

- Oリングを使用せず、取り扱いが簡単なクイック Release/Lockメカニズム
- 耐薬品性に優れたテフロン製Helix Sealを採用
- ネブライザーの位置調整不要のPositive stop機構
- デッドボリュームの削減によるメモリー効果の減少と洗浄時間の短縮

Glass Expansion社製の新しいネブライザーアダプターHelixは、Oリングの劣化による様々なトラブルを解決し、お客様のご負担を軽減する目的で開発されました。従来のOリングタイプでは考えられなかったスムーズなネブライザー交換作業が可能となり、装置のダウンタイムを削減します。

ネブライザーを固定するためのロックナットとシールには共に耐薬品性に優れたテフロン材料が使用されており、幅広い分野で優れた安定性を実現しています。

HelixネブライザーアダプターはGlass Expansion社製の全てのガラススプレーチャンバーに搭載可能です。詳しくは下記窓口までご相談ください。

* 特許出願中



GLASS EXPANSION
Quality By Design

本社

15 Batman Street, West Melbourne

Victoria, 3003 Australia

Tel : +61-3-9320-1111

Fax : +61-3-9320-1112

E-mail (日本語) : jpnenquiries@geicp.com

URL : <http://www.geicp.com>

販売代理店

(株)エス・ティ・ジャパン

東京都中央区日本橋蛸殻町1-14-10

Tel : 03-3666-2561(代)

Fax : 03-3666-2658

E-mail : m-abe@stjapan.co.jp